

novità

# Frese in composito autorigeneranti

## whitech

### Frese odontoiatriche

in materiale composito (resina rinforzata da fibra in vetro di zirconio riconosciuta come AR Glass - resistente agli alcali).

#### **Autorigeneranti, ad abrasività costante, sterilizzabili in autoclave.**

Durante l'impiego il composito si consuma lasciando scoperta la fibra che esercita l'azione abrasiva: dato che la fresa è completamente in composito, è possibile utilizzarla fino in fondo eventualmente modificandone la forma.

Le frese **Whitech** sono indicate:


- per **rimuovere macchie** di colore dallo smalto,
- per **levigare lo smalto** dopo la pulizia dei denti,
- in odontoiatria conservativa - per **eliminare gli eccessi** di compositi e sigillanti,
- in parodontologia - nella **levigatura** delle **radici** dopo detartraggio del parodonto e del tessuto radicolare,
- in ortodonzia, per eliminare ogni residuo di cemento adesivo dallo smalto **dopo la rimozione di bande o brackets**,
- in implantologia, per eliminare senza vibrazioni gli **eccessi di cemento** provvisorio o definitivo.

Queste operazioni vengono condotte in maniera efficace **senza provocare alcun danno** a smalto, ceramica e mucose.



**ISASAN** 

ISASAN srl - Via Bellini, 17 - 22070 Rovello Porro (CO)  
Tel 02 96754179 [www.isasan.com](http://www.isasan.com) - [info@isasan.com](mailto:info@isasan.com)

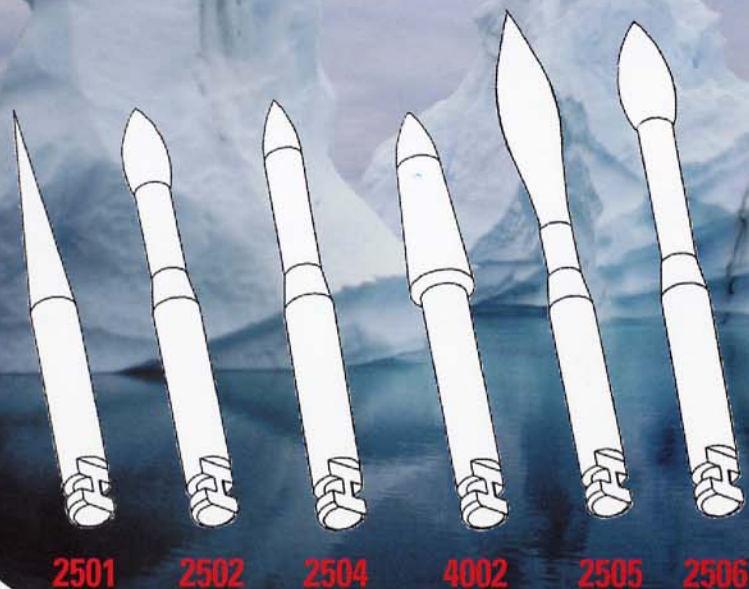

2501

2502

2504

4002

2505

2506

**CONFEZIONI DISPONIBILI**

- blister da 6 frese per ciascuna forma
- assortimento 6 forme (2540)

## ESEMPI DI UTILIZZO

Rimuovere macchie di colore dallo smalto e per levigare lo smalto dopo la pulizia dei denti



*Archivio Dr Cavalli per gentile concessione*

In implantologia:  
per limare gli eccessi di cemento provvisorio o definitivo



*Archivio Manacorda/Caprini per gentile concessione*

In odontoiatria conservativa:  
per eliminare gli eccessi di compositi e sigillanti



In ortodonzia: per eliminare ogni residuo di cemento adesivo dallo smalto dopo la rimozione di bande o brackets



*Archivio Dr Osada/Fritz/Finger per gentile concessione*